


SUPERLAB®

Your Lab - Our Passion



DYMIND

Pametna izbor
za veterinare

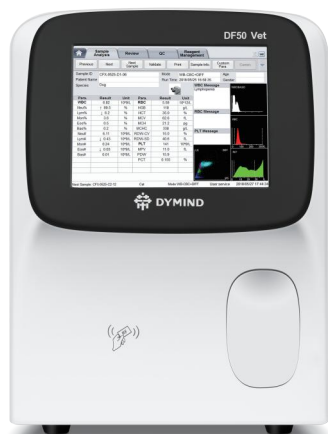

DF50 Vet

5-Part Automatski hematološki analizator za veterinare



Modovi testiranja za više životinja: dostupni za pse, mačke, zečeve, krave, konje i ovce i mogu se prilagoditi



Jednostavan rad: TFT ekran osetljiv na dodir od 10.4 inča



Ušteda prostora: analizator malih dimenzija, sa ugrađenim pozicijama za reagense

Principi

Protočna citometrija (FCM)+Raspršivanje laserske svetlosti pod 3 ugla + Hemijska metoda bojenja za diferencijaciju WBC; Metod el. impedanse za test RBC i PLT+ Kolorimetrijska metoda bez cijanida za test HGB

Ponovljivost

WBC: $\leq 3.0\%$ RBC: $\leq 2.0\%$ HGB: $\leq 2.0\%$
 MCV: $\leq 2.0\%$ PLT: $\leq 6.0\%$

Kapacitet

Do 60 testova na sat

Zapremina uzorka

20 μ L

Komunikacija

Podržava dvosmernu komunikaciju sa LIS

Parametri

23 parametra : WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#,Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC,HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD,RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT
 3 histograma za WBC, RBC i PLT
 4 skatergrama za diferencijaciju WBC

Opseg linearnosti

WBC: 0.00-300.00x 10⁹/L HGB: 0-250 g/L PLT: 0-3000x10⁹/L
 RBC: 0.00-14.50x10¹²/L HCT: 0.0-67.0%

Zahtevi u pogledu napajanja

100V-240V ~50/60Hz

Dimenzije

364mm (Š)*498mm (V)*431mm (D)

Neto težina

27kg

SUPERLAB[®]
 Your Lab - Our Passion



Beogradska 59, Vrčin 11224,
 Mob: 064 8720 175 Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.253,
 E-mail: vetlab@super-lab.com, www.super-lab.com



Distributer za BiH:

EUROLAB

Filipa Višnjića 22
 76 300 Bijeljina

055-212-278
 055-209-480

eurolab@teol.net
office.eurolab@gmail.com
www.eurolab.ba